


**Модел 527**



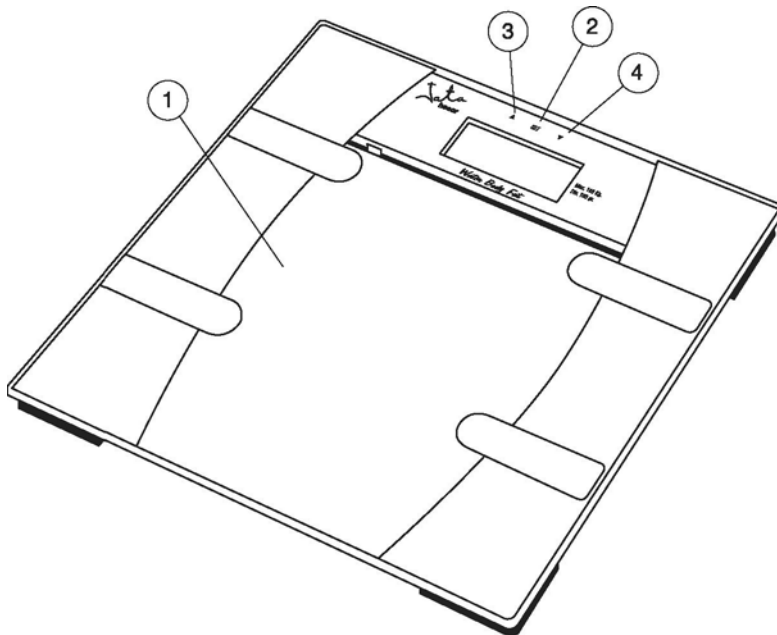

### ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. Платформа
2. Бутон "SET" („ЗАДАВАНЕ“) за паметта
3. Бутон "Up" („Нагоре“)
4. Бутон "Down" („Надолу“)

### Модел 527

#### ПРОЦЕНТ НА ВОДАТА/ МАЗНИНТЕ В ТЯЛОТО

Телесни мазнини (%)								
Възраст	Жени				Мъже			
	Ниско тегло	Нормално тегло	Високо тегло	Пълни	Ниско тегло	Нормално тегло	Високо тегло	Пълни
10-39	14-20	21-25	26-31	32-38	11-17	18-23	24-29	30-36
40-55	15-21	22-26	27-32	33-38	12-18	19-24	25-30	31-37
56-80	16-22	23-27	28-33	34-38	13-19	20-25	26-31	32-38

\_\*

Вода в тялото (%)						
Възраст	Жени			Мъже		
	Ниско тегло	Нормално тегло	Високо тегло	Ниско тегло	Нормално тегло	Високо тегло
10-15	<57	57-67	>67	<58	58-72	>72
16-30	<47	47-57	>57	<53	53-67	>67
31-60	<42	42-52	>52	<47	47-61	>61
61-80	<37	37-47	>47	<42	42-56	>56



## ВНИМАНИЕ

Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.

Не допускате достъпа на деца до найлоновите пликосе и опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност.

Поставете кантара върху устойчива, равна повърхност.

Не поставяйте кантара върху килими или други меки материали. Те могат да доведат до грешки в измерването.

Повърхността, върху която поставяте електронния кантар и неговата платформа трябва да бъдат сухи, за да се избегне риска от евентуално подхлъзване.

Не скачайте на или от кантара.

Уредът се изключва автоматично няколко секунди след претеглянето.

Препоръчително е теглото да бъде измервано по едно и също време. Най-добре е това да става преди закуска.

## ВНИМАНИЕ:

**За осигуряване на по-добра проводимост и получаване на верен резултат от анализа на съдържанието на вода и мазнини в тялото, е необходимо да се мерите с боси крака. Краката трябва да бъдат в добър контакт с металните части на повърхността.**

**Не бива да използвате кантара, ако ви е имплантиран сърдечен стимулатор или носите в себе си друго електрическо или електронно устройство.**

**Наличието на много течност, някои заболявания, приемането на храна, менструалният цикъл и др. могат да променят резултата от измерването.**

Този кантар е чувствителен електронен уред. Възможно е, други високочестотни уреди, като например мобилни телефони, радио станции, устройства за дистанционно управление и микровълнови уреди да причинят смущения, ако кантарът се ползва близо до тях. Дръжте кантара далеч от такива уреди в случай, че забележите някакви нередности на дисплея..

Електронният кантар не е предназначен за търговски или медицински цели.

Уредът е предназначен само за домашна употреба.

Не потапяйте тялото на уреда във вода. При необходимост, почистете кантара с влажна кърпа.

При почистване, не използвайте химически или абразивни средства, например метална тел, които могат да повредят повърхностите на уреда.

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Електронният кантар работи с две батерии от тип CR2032 от 3 V. (включени в комплекта)

Отворете капака, разположен от долната страна на кантара и свалете защитния етикет от батериите, за да може да работи уреда. След това, установете превключвателя на желаната мерна единица **Kg** (килограми) - **Lb** (фунтове) - **St.** (стоунове).

## ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО

• **ВКЛЮЧВАНЕ:** За да включите кантара, докоснете леко с крак стъклената платформа в близост до LCD дисплея и изчакайте на него да се появи "0.0".

• Застанете в изправено положение на кантара, като поставите бавно първо единия, а след това и другия крак.



## ВНИМАНИЕ

Ако искате да премерите само теглото си:

• Ако се мерите с обувки, кантарът ще покаже резултата от измерването, след което на дисплея ще се появи "Errr2". Показанието за теглото и "Errr2" се показват последователно на дисплея.



## Модел 527

- Когато се мерите с боси крака, кантарът ще покаже резултата от измерването на теглото, последван от съдържанието на вода в тялото. В такъв случай **"не обръщайте внимание на показаната стойност за съдържанието на вода и мазнини в тялото"**, тъй като личните вид данни все още не са били въведени в паметта на уреда.
- Показанията остават на дисплея още няколко секунди, След което кантарът се изключва.

## ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

- Кантарът има допълнителна функция, която след претегляне позволява да се определи съдържанието на вода и мазнини във вашето тяло. За да можете да използвате тази функция, е необходимо да въведете и запишете в паметта на кантара следните данни: пол, височина и възраст. Кантарът разполага с памет, в която могат да бъдат записани личните данни на 10 лица.
- За да въведете данните в паметта на кантара, изпълнете следните стъпки.
- Натиснете бутона **"SET"** и изчакайте на дисплея да се появи "0.0". Натиснете отново **"SET"**. На дисплея ще се появят програмируемите регистри на паметта (между P0 и P9). След това, като използвате бутоните "up" (3) и "down" (4), намерете "P0", за да въведете данните на първото лице. Натиснете **"SET"** за запамятаване. На дисплея се показват мигащи символи на мъж и жена.
- Използвайте бутони 3 и 4, за да изберете желанния символ, след което натиснете бутона "SET", за да запаметите избраното. Веднага след това, на екрана се показва височината в сантиметри или в инчове, в зависимост от това каква мерна единица за теглото сте избрали преди това: KG (килограми), LB (фунтове) или ST (стоунове).
- Използвайте същите бутони, за да въведете височината, като увеличите или намалите показаната на дисплея стойност. Натиснете **"SET"** за запамятаване. На дисплея започва да мига показанието за възрастта.
- Използвайте същите бутони, за да въведете възрастта. Натиснете **"SET"** за запамятаване.
- Сега, данните на лицето са вече записани в паметта. Изчакайте появата на "0.0" на дисплея. Кантарът се изключва.
- Повторете процедурата за всички лица, които ще ползват кантара.

## ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕНТА НА ВОДА И МАЗНИНИ В ТЯЛОТО

- След като сте въвели всички необходими данни в паметта на кантара, за да премерите теглото си и получите информация за съдържанието на вода и мазнини в тялото, изпълнете следното:
- Натиснете **"SET"**, след което използвайте бутони 3 или 4, за да извикате на дисплея регистъра на паметта, съдържащ вашите лични данни. Изчакайте появата на "0.0" на дисплея.
- Стъпете на кантара и останете неподвижен. На дисплея първо ще се покаже резултатът за вашето тегло. След това се появява **|||||** и последвано след няколко секунди от процентното съдържание на мазнини във вашето тяло с **"FAT" („МАЗНИНИ")** до него. След това се показва и резултатът за процента вода с **"TBW"** до него. Тези показания ще се покажат няколко пъти едно след друго, след което кантарът се изключва. Представените по-горе таблици ще ви дадат ориентация за съдържанието на вода и мазнини.

### Запомнете

- Ако на дисплея се появи **"Err"**, това означава, че е било надхвърлено максималното тегло на кантара.
  - Ако на дисплея се появи **"Err2"**, това означава наличие на грешка при измерването на теглото или определянето на процентите или че липсва добър контакт между тялото и кантара (например при мерене с обувки).
  - При появата на "Lo" на дисплея, трябва да смените батериите. За да го направите, отворете капачето на задната страна на кантара и сменете батериите.
  - Сменете батериите, като обърнете внимание, че "+" трябва да бъде отгоре.
- \*

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Осигурете изхвърляне на уреда в съответствие с местната регулация на отпадъците.
- Изхвърляйте батериите в съответствие с местната регулация на отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на опазването на околната среда

**БЪЛГАРСКИ:** В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се възползва на всички предвиджани от действащото им законодателство права.

